

IMPLANTATLINIE



CORE



Human Technology

CORE

Der Kern für Ihre klinischen Entscheidungen

Das Ergebnis unserer Entwicklungen: Die **CORE-Implantatlinie** – **6 Durchmesser in jeweils mehreren Längen** – für die Behandlung fast aller Indikationen.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE



KONISCHER IMPLANTATKÖRPER

Einfache Implantatinserterion in allen Knochenklassen durch einen selbstschneidenden Apex mit hohem Vorschub.



1 VERBINDUNG UND PROTHETISCHE PLATTFORM



Die vierlappige Innenverbindung hat ein **Austrittsprofildurchmesser von 3,5 mm**.

Dadurch kann eine hohe Stabilität des periimplantären Weichgewebes erzielt und eine Versorgung mit einem limitierten interdentalen Platzangebot realisiert werden.



UnicCa®-OBERFLÄCHE



Die **UnicCa®-Oberfläche** ermöglicht eine **höhere Knochenstabilität und eine verbesserte Osseointegration**.



WENIGER KOMPONENTEN

CORE-Implantate sparen **Zeit** und **Kosten**: Wenige Bohrer und ein **einfaches und übersichtliches Chirurgie-Kit**.




BIOBLOCK®-KONZEPT



CORE nutzt das biomechanische **BioBlock®**-Konzept zur Gewährleistung **der hermetischen Abdichtung und der biologischen Versiegelung**, wodurch der marginale Knochen um die Implantate herum besser erhalten bleibt. Für ein breiteres Austrittsprofil stehen sich erweiternde Aufbauteile zur Verfügung.

Empfohlene Bohrsequenzen

Implantate mit Standardlänge (von 8,5 bis 15 mm)

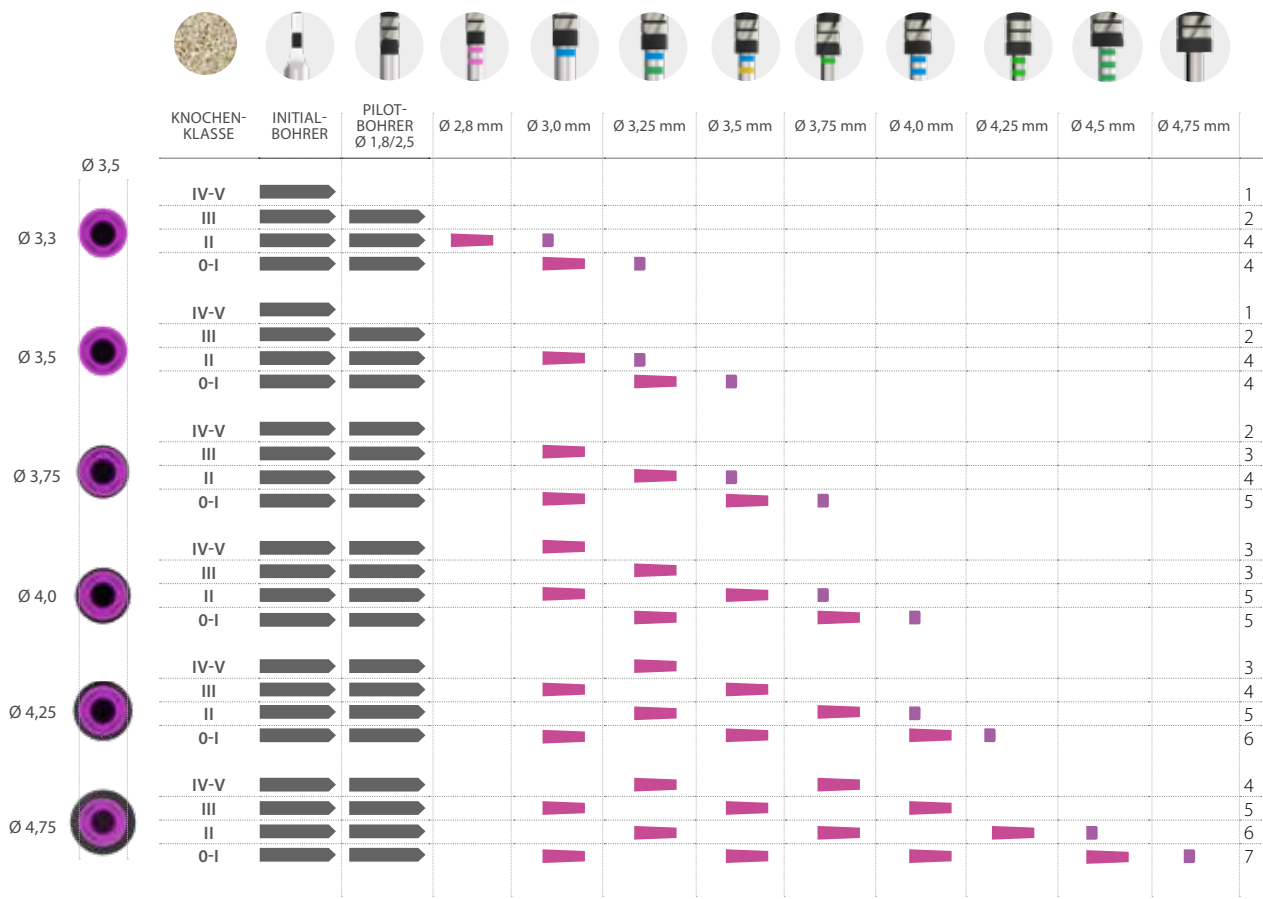

- Gesamtlänge des Implantats
- 6,5 mm Bohrtiefe
- 2-3 mm Bohrtiefe




Typ	Hounsfield	BOHRER	GESCHWINDIGKEIT	KÜHLUNG
I	1.050 - 1.400	Initialbohrer	800 - 1.000 U/min	ja
II	850 - 1.000	Bohrer	50 - 75 U/min	nein
III	550 - 800	Bohrer mit frontaler Schneide	50 - 75 U/min	nein
IV	400 - 500			
V	100 - 350			

Kurze Implantate

(4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 mm)

Empfohlene Bohrsequenzen

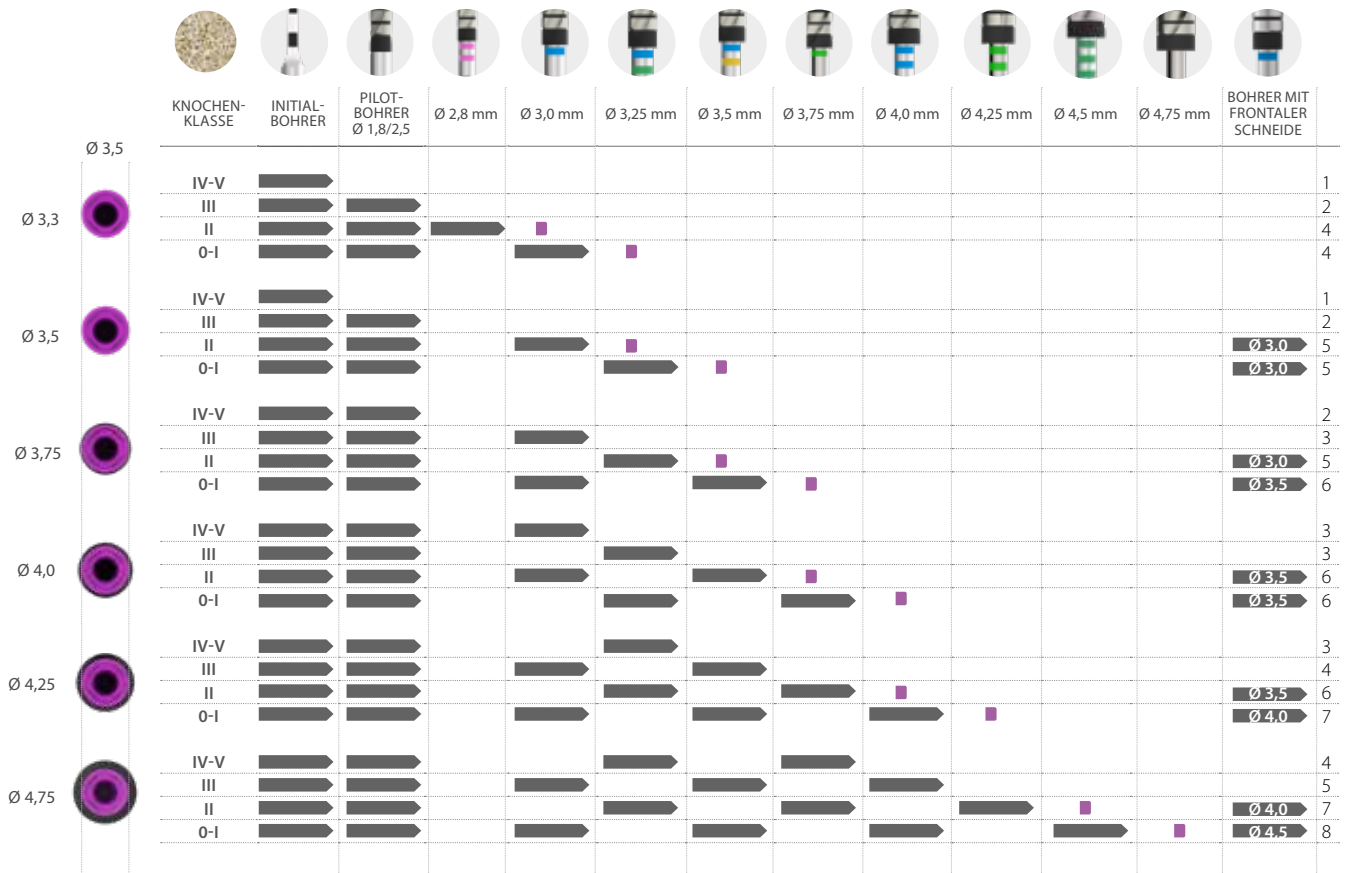


- Gesamtlänge des Implantats
- Gesamtlänge des Implantats mit Bohrer des angegebenen Durchmessers
- 2-3 mm Bohrtiefe

Schmale Plattform

IMPLANTAT


CORE

Prothetische Plattform: Ø 3.5 mm

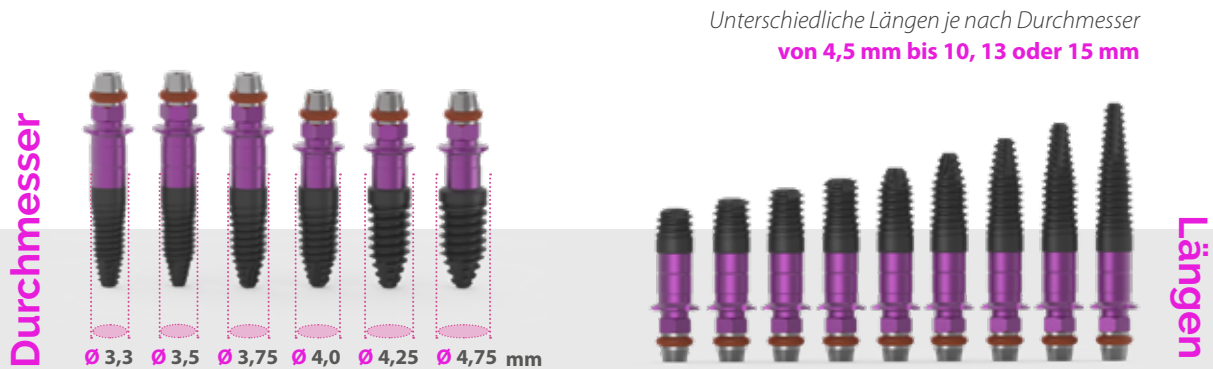

Prothetische Versorgungsmöglichkeiten

der CORE-Implantate

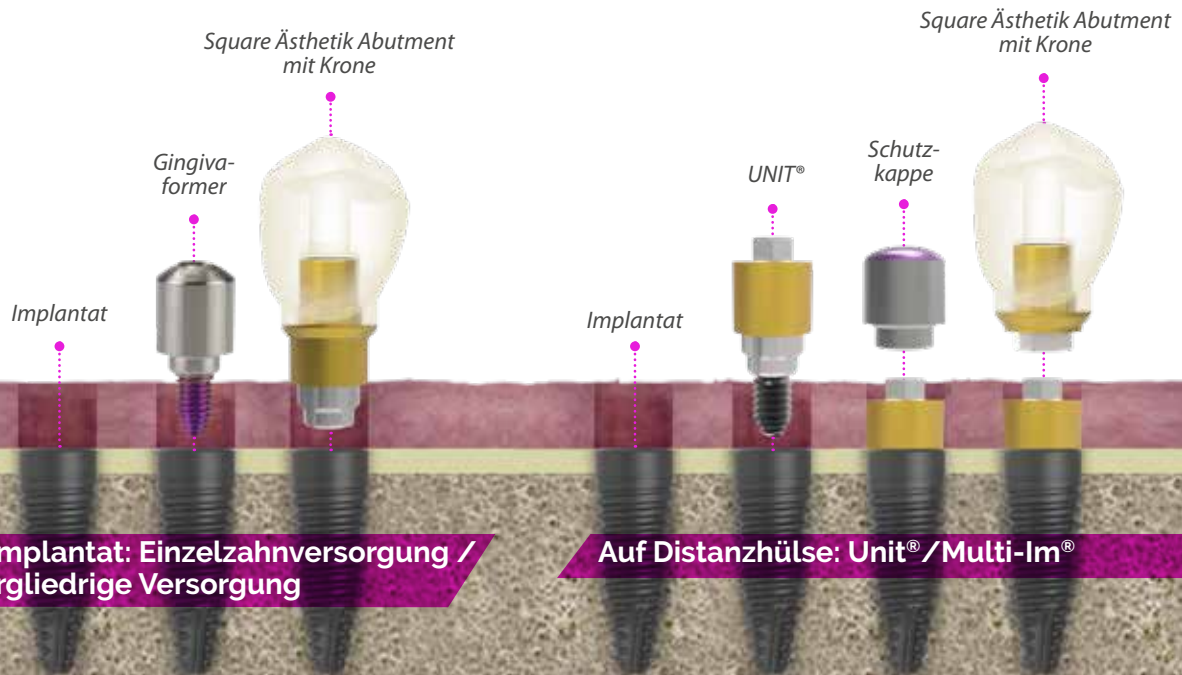

Die Restaurationen können sowohl mit konventionellen Verfahren als auch mit CAD/CAM angefertigt werden.

i

4,5



4,5 mm LANGE IMPLANTATE:

Verschraubte mehrgliedrige Restaurationen auf speziellen Multi-Im® Distanzhülsen. Einzelzahnversorgungen oder Versorgungen direkt auf dem Implantat sind nicht indiziert.



BTI Comercial

San Antonio, 15 - 5º
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava) · SPANIEN
Tel.: +34 945 140 024
Fax: +34 945 135 203
pedidos@bticomercial.com

B.T.I.

Biotechnology Institute S.L.

Parque Tecnológico de Álava
Leonardo da Vinci, 14
01510 Miñano (Álava) Spanien
bti.implantes@bti-implant.es

Niederlassungen

DEUTSCHLAND

Tel. +49 7231 428060
Fax +49 7231 4280615
info@bti-implant.de

FRANKREICH

Tel: (33) 556 18 11 18
info@bti-implant.fr

ITALIEN

Tel.: +39 0270605067
info@bti-implant.it

MEXIKO

Tel: (52) 55 52502964
Fax: (52) 55 55319327
bti.mexico@bti-implant.com

PORTUGAL

Tel: (351) 22 120 1373
Fax: (351) 22 120 1311
bti.portugal@bticomercial.com

VEREINIGTES KÖNIGREICH

Tlf: +44 02039 661873
customerservice@bti-implant.co.uk

USA

Cell: 610 209 6040
Office: 866 646 4067
info@bti-implant.us



CleanImplant
Trusted Quality Mark
2017 - 2021



www.bti-biotechnologyinstitute.com

HINWEIS: Wenden Sie sich an Ihren Händler, um Auskünfte über die Verfügbarkeit des Produktes in den verschiedenen Märkten zu erhalten.



BTI APP
PRODUKTNEUHEITEN

Version für iPhone / Smartphone
Version für iPad / Tablet (**Inhalte ausschließlich für Kunden**)