BROCA DE CORTE FRONTAL





BROCA DE CORTE FRONTAL

UMA TÉCNICA DE PERFURAÇÃO CLÍNICA

Broca de corte frontal, concebida para obter o melhor assentamento dos implantes extracurtos e para trabalhar a cortical nas elevações de seio trans-alveolares e na proximidade do nervo dentário.

7 diâmetros para poder utilizar-se com a sequência de perfuração adequada segundo o diâmetro de implante. As marcas de profundidade diferentes são úteis para conhecer a localização exata da broca, em função da altura de osso remanescente.

UM DESIGN EXCLUSIVO E INOVADOR DO BTI

BROCAS DISPONÍVEIS



UMA FERRAMENTA DE CORTE QUE NÃO DANIFICA ESTRUTURAS ANATÓMICAS



SEQUÊNCIA DE PERFURAÇÃO


Estas brocas devem ser usadas no momento em que se tenha gerado o alvéolo adequado ao seu diâmetro, desta forma realizam uma instrumentação apical do mesmo, na base do seio e/ou permitindo um melhor avanço do implante extracurto, conseguindo uma excelente estabilidade primária, evitando compressão.

SEQUÊNCIA DE FRESAGEM IMPLANTE 5,5 mm ø UNIVERSAL PLUS EXTRACURTO




UMA SOLUÇÃO BTI PERFEITA PARA AS CIRURGIAS MAIS COMPLICADAS

► ELEVAÇÃO DE SEIO TRANS-ALVEOLAR

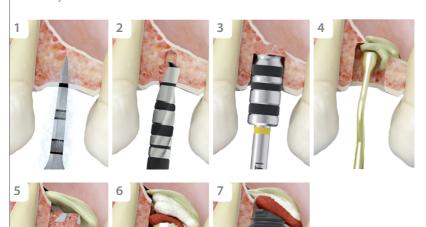

- Broca de início respeitando 1,5 mm de margem de segurança.
- 2. Aumentámos o diâmetro da perfuração conforme a escolha do implante.
- Broca de corte frontal, desgastando a cortical do seio, para abrir um pequeno acesso onde introduziremos o material de enxerto.
- 4. Inserção de uma membrana de fibrina Endoret® (PRGF®) no interior do seio com um compactador de osso, antes de continuar a abrir a cortical, para descolar a membrana de Schneider.
- 5. Abertura total da janela crestal com a Broca, sem risco de danificar a membrana do seio.
- 6. Introdução do material de enxerto (autólogo e biomateriais) no interior do seio, até alcançar a dimensão desejada, para inserir implantes.
- Inserção do implante no alvéolo gerado, com apoio na cortical do seio e com o ápice en el no interior do mesmo e rodeado de enxerto.

COLOCAÇÃO DE IMPLANTES CURTOS EM MANDÍBULA

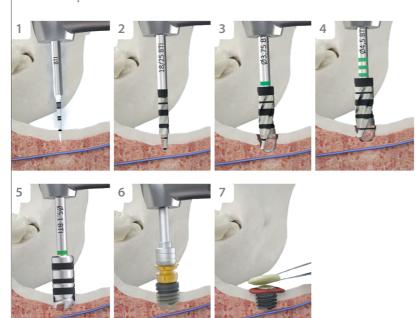

- 1. Broca de início respeitando 1,5 mm de margem de segurança.
- **2.** Sequência de perfuração para a preparação do alvéolo, chegar-se-á em profundidade até à mesma longitude do implante.
- Continua-se a sequência de perfuração, aumentando progressivamente o diâmetro e a longitude do alvéolo.
- **4.** A última broca, antes do implante, deve ter o diâmetro adequado para conseguir uma estabilidade primária, evitando sempre compressões.
- 5. Broca de corte frontal, trabalhando na zona apical do alvéolo para assentar o implante sem compressão a esse nível. Por vezes, é necessário trabalhar na cortical superior do canal.
- Colocação do implante no alvéolo irrigado com PRGF Endoret, ao nível previsto.
- 7. Implante supracrestal, em duas fases cirúrgicas recoberto de enxerto + Endoret® (PRGF®) para provocar o crescimento vertical em torno do mesmo.



OSSO AUTÓLOGO



As partículas ósseas soltas pela perfuração acumulam-se nos espaços entre as lâminas cortantes e são desalojadas para a zona entalhada de retenção.

O MELHOR INSTRUMENTO PARA EVITAR CIRURGIAS COMPROMETIDAS

Estas brocas permitem a realização da elevação de seio trans-alveolar com uma técnica minimamente invasiva.

Facilitam a colocação de implantes extracurtos próximo do nervo dentário com um excelente controlo, minimizando o risco de o danificar.





BTI Comercial

San Antonio, 15 · 5° 01005 Vitoria-Gasteiz (Álava) · SPAIN Tel: +34 945 140 024 pedidos@bticomercial.com

Subsidiaries

GERMANY

Tel.: +49 7231 428060 info@bti-implant.de

FRANCE

Tel: +33 (5) 54530209 serviceclient@bti-implant.fr

ITALY

Tel.: (39) 0270605067 info@bti-implant.it

MEXICO

Tel: (52) 55 52502964 bti.mexico@bti-implant.com

B.T.I.

Biotechnology Institute S.L. Parque Tecnológico de Álava Leonardo da Vinci ,14 01510 Miñano (Álava) SPAIN bti.implantes@bti-implant.es

PORTUGAL

Tel: (351) 22 120 1373 bti.portugal@bticomercial.com

UK

Tel: +44 (0) 2039 661873 customerservice@bti-implant.co.uk

USA

Office: 866 646 4067 bti@bti-implant.us

 $NOTA: consulte \ disponibilidade \ do \ produto \ nos \ diferentes \ mercados \ com \ o \ seu \ distribuidor$