


# SQUARE ÄSTHETIK- ABUTMENTS



**bti.**<sup>®</sup>

Human  
Technology

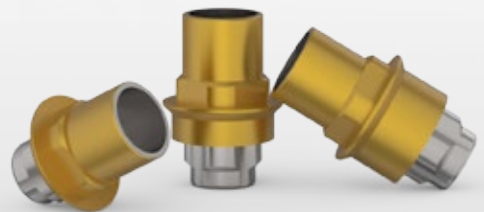




## SQUARE ÄSTHETIK-ABUTMENTS

### AUSGEZEICHNETE ÄSTHETIK UND VIELSEITIGKEIT

Neue SQUARE Ästhetik-Abutments für Direktversor-  
gungen auf Implantaten, mit BIO-Profil zur dauerhaften  
Stabilisierung der Weichgewebe.

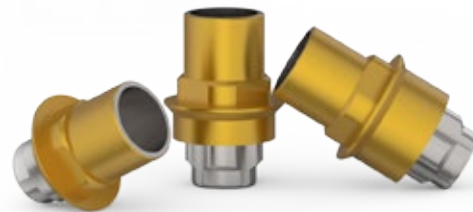


Hohe Flexibilität: verwendbar mit oder ohne aus-  
brennbarer Hülse zur konventionellen Herstellung von  
Zahnersatz oder mit CAD/CAM-Systemen.

# ZUR VERWENDUNG MIT JEDER LABORTECHNIK

## AUSBRENNBARE HÜLSE

Hergestellt aus Ertacetal

- Zur konventionellen Weiterverarbeitung im Labor: Presskeramik oder Guss.
- Für 3.0, schmale (1), Standard (2) und breite Plattform (3).

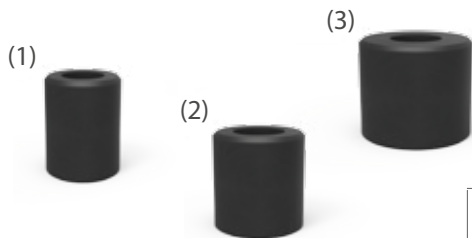

## MATERIAL

Hergestellt aus Titan mit Ti Golden® Oberflächenbehandlung.

## ROTATIONSGESCHÜTZT

Das quadratische Design verhindert Rotationen und erleichtert die prothetische Arbeit mit der CAD/CAM-Technologie.

## ZWEI VERSIONEN



## BIO PROFIL

Erhaltung der Weichgewebedurchblutung und Risikominimierung einer Retraktion im ästhetischen Bereich.

## (1) ROTATIONSGESCHÜTZT

Für Einzelzahn- (verschraubt und zementiert) und mehrgliedrige Versorgungen (zementiert)

## (2) NICHT ROTATIONSGESCHÜTZT

für mehrgliedrige verschraubte Restaurationen

## HÖHEN

Die Square Ästhetik-Abutments sind in folgenden Gingivahöhen erhältlich:

INTERNA®: 0, 1, 2 und 3 mm

EXTERNA®: 0, 1 und 2 mm


## PLATTFORMEN

EXTERNA®: Tiny®, Standard und breite Plattform

INTERNA®: 3.0, schmale, Standard und breite Plattform

## VERBINDUNGEN

### INTERNA®

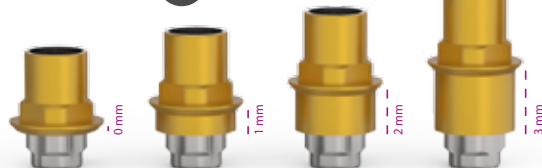

### EXTERNA®



## ANWENDUNGSGEBIETE

### VERWENDUNG OHNE AUSBRENNBARE HÜLSE

Für CAD/CAM-Prothetik. Die Aufbauten mit präfabrizierten Implantatverbindungen in Titan werden für zementierte Prothetik verwendet. Hierauf können Kronen und Brücken aus Kunststoff, Zr, e-max, Ti und Cr-Co hergestellt werden.




### VERWENDUNG MIT AUSBRENNBARER HÜLSE

Zur Herstellung konventioneller, verschraubter und zementierter Prothetik (Herstellung von Abutments).



## FAKTEN UND VORTEILE

1. EINZELZAHN- UND MEHRGLIEDRIGE VERSORGUNGEN DIREKT AUF IMPLANTATEN: VERSCHRAUBT ODER ZEMENTIERT
2. SOFORTBELASTUNG AUF EINZELNEN IMPLANTATEN IM ÄSTHETISCHEN BEREICH

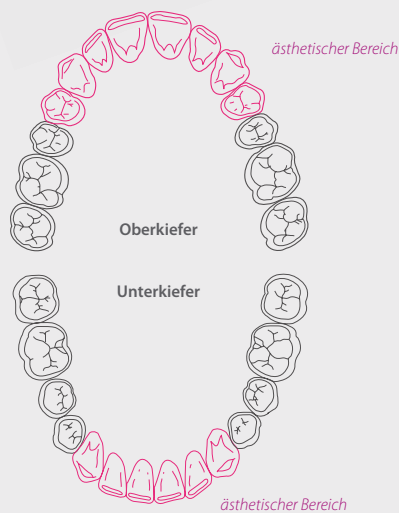

## BIO EMERGENZPROFIL ZUR DAUERHAFTEN ERHALTUNG DER GINGIVA

- Ermöglicht die Herstellung eines individuell auf den Patienten abgestimmten Emergenzprofils.
- Herstellung von verklebten Abutments mit enormer Zeitersparnis.
- Hermetische Passung zwischen Implantat und Abutment.
- Die verschiedenen Höhen ermöglichen individuell auf den Biotyp des Patienten abgestimmte Abutments.



**bti**<sup>®</sup>

Biotechnology  
Institute  
Human Technology



#### **BTI Comercial**

San Antonio, 15 - 5º  
01005 Vitoria-Gasteiz  
(Álava) · SPAIN  
Tel: +34 945 140 024  
Fax: +34 945 135 203  
pedidos@bticomercial.com

#### **B.T.I.**

#### **Biotechnology Institute S.L.**

Parque Tecnológico de Álava  
Leonardo da Vinci ,14  
01510 Miñano (Álava) SPAIN  
bti.implantes@bti-implant.es

#### **Niederlassungen**

##### **DEUTSCHLAND**

Mannheimer Str. 17  
75179 Pforzheim · Deutschland  
Tel.: +49 7231 428060  
Fax: +49 7231 4280615  
info@bti-implant.de

##### **PORTUGAL**

Praça Mouzinho de Albuquerque 113, 5º  
4100-359 Porto · Portugal  
Tel.: (351) 22 120 1373  
Fax: (351) 22 120 1311  
bti.portugal@bticomercial.com

##### **FRANKREICH**

6 Avenue Neil Armstrong  
Immeuble Le Lindbergh  
33692 Merignac CEDEX · France  
Tel.: (33) 556 18 11 18  
info@bti-implant.fr

##### **UK**

870 The Crescent  
Colchester Business Park · Colchester  
Essex CO49YQ · UK  
Tel.: (44) 01206580160  
Fax: (44) 01206580161  
info@bti-implant.co.uk

##### **ITALIEN**

Via Conservatorio 22  
20122 Milano · Italy  
Tel.: (39) 02 7060 5067  
Fax: (39) 02 7063 9876  
bti.italia@bti-implant.it

##### **USA**

1730 Walton Road  
Suite 110  
Blue Bell, PA 19422-1802 · USA  
Tel.: (1) 215 646 4067  
Fax: (1) 215 646 4066  
info@bti-implant.us

##### **MEXIKO**

Ejercito Nacional Mexicano 351, 3A  
Col. Granada Delegación Miguel Hidalgo  
Messico DF · CP 11520 · Mexico  
Tel.: (52) 55 52502964  
Fax: (52) 55 55319327  
bti.mexico@bti-implant.com

[www.bti-biotechnologyinstitute.de](http://www.bti-biotechnologyinstitute.de)

Hinweis: Fragen Sie Ihren Vertriebspartner nach der Verfügbarkeit der Produkte in den verschiedenen Ländern.



#### **BTI-APP** PRODUKTNEUHEITEN

Version für iPhone / Smartphone  
Version für iPad / Tablet (**exklusive Inhalte für Kunden**)