

# PILIERS ESTHÉTIQUES SQUARE



**bti.**<sup>®</sup>

Human  
Technology





## PILIERS ESTHÉTIQUES SQUARE

### EXCELLENTE ESTHÉTIQUE ET GRANDE VERSATILITÉ

Une nouvelle gamme de piliers Square pour prothèse directe sur implant, qui présentent un Profilé BIO pour la conservation sur le long terme de la muqueuse gingivale.




Extrêmement versatiles, ils peuvent être utilisés avec ou sans corps calcifiable, pour l'élaboration de prothèses traditionnelles ou pour des systèmes CAD/CAM.

# PERMET L'UTILISATION DE TOUTE TECHNIQUE DE LABORATOIRE

## CORPS CALCINABLES

- Fabriqués en Ertacetal.
- Pour procédures traditionnelles de laboratoire : injection de céramique et coulage.
- Pour plateformes universelle (1), large (2) et étroite (3).

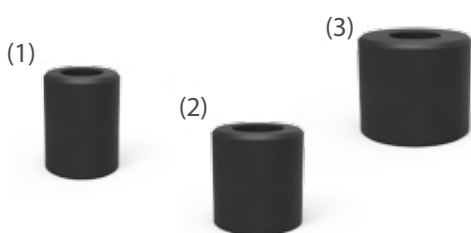

## MATÉRIAU

Fabriqué en Titane (Ti) avec traitement de la surface Ti Golden.

## CONCEPTION ANTI-PIVOTANTE

Conception anti-pivotante Square pour simplifier le travail prothétique sur CAD/CAM.

## DEUX VERSIONS



## PROFILÉ BIO

Profilé prothétique BIO pour la conservation de la vascularisation de la muqueuse gingivale et pour minimiser les risques de récession dans les cas de biotypes fins.

(1) NON PIVOTANT :  
Pour prothèse unitaire (vissée et cimentée) et multiple cimentée.

(2) PIVOTANT :  
Pour prothèse multiple vissée.

## HAUTEURS


Les piliers esthétiques Square sont disponibles en différents hauteurs gingivales :  
INTERNA: 0, 1, 2, 3 mm.  
EXTERNA: 0, 1 et 2 mm.

## PLATEFORMES

EXTERNA®: Tiny, universal et large  
INTERNA®: 3.0, étroite, universelle et large

## CONNEXIONS

### INTERNA®

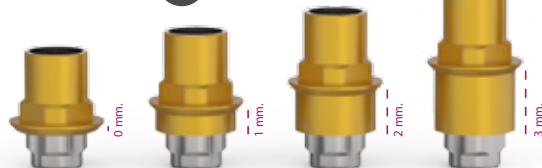

### EXTERNA®



## MODE D'EMPLOI

### SANS CORPS CALCINABLE

Pour prothèse conçue sur CAD/CAM. Les piliers sont utilisés en tant que bases usinées en Ti pour prothèse cimentée sur lesquelles peuvent être modelées les douilles en Zr, e-max, Ti, Cr-Co et résine.



### AVEC CORPS CALCINABLE

Pour l'élaboration de prothèses traditionnelles vissées <sup>(1)</sup> et cimentées <sup>(2)</sup> (élaboration du pilier).

(1)




(2)



## AVANTAGES CONCURRENTIELS

1. PROTHÈSE UNITAIRE ET MULTIPLE DIRECTE SUR IMPLANT : VISSÉE OU CÉMENTÉE
2. CHARGE IMMÉDIATE SUR UNITAIRES ZONE ESTHÉTIQUE.

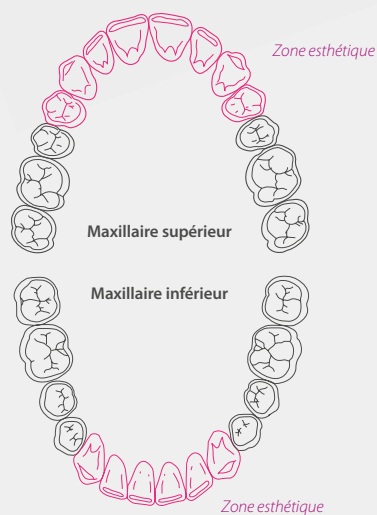

## PROFILÉ D'ÉMERGENCE BIO: LE MAINTIEN À LONG TERME DE LA MUQUEUSE GINGIVALE

- Permet d'élaborer un **profilé d'émergence BIO** adapté aux besoins de chaque patient
- **Simplifie la préparation** de piliers en termes de temps et d'expérience
- **Scellement hermétique** implant-prothèse
- **La versatilité des hauteurs** permet de choisir le pilier en fonction du biotype gingival.



**bti**®

Biotechnology  
Institute  
Human Technology



### **BTI Comercial**

San Antonio, 15 - 5º  
01005 Vitoria-Gasteiz  
(Álava) · SPAIN  
Tel: +34 945 140 024  
Fax: +34 945 135 203  
pedidos@bticomercial.com

### **B.T.I.**

#### **Biotechnology Institute S.L.**

Parque Tecnológico de Álava  
Leonardo da Vinci ,14  
01510 Miñano (Álava) SPAIN  
bti.implantes@bti-implant.es

### **Subsidiaries**

#### **GERMANY**

Mannheimer Str. 17  
75179 Pforzheim · Germany  
Tel. +49 (0) 7231 428060  
Fax +49 (0) 7231 4280615  
info@bti-implant.de

#### **PORTUGAL**

Praça Mouzinho de Albuquerque 113, 5º  
4100-359 Porto · Portugal  
Tel: (351) 22 120 1373  
Fax: (351) 22 120 1311  
bti.portugal@bticomercial.com

#### **FRANCE**

6 Avenue Neil Armstrong  
Immeuble Le Lindbergh  
33692 Merignac CEDEX · France  
Tel: (33) 556 18 11 18  
info@bti-implant.fr

#### **UK**

870 The Crescent  
Colchester Business Park · Colchester  
Essex CO49YQ · UK  
Tel: (44) 01206580160  
Fax: (44) 01206580161  
info@bti-implant.co.uk

#### **ITALY**

Via Conservatorio 22  
20122 Milano · Italy  
Tel: (39) 02 7060 5067  
Fax: (39) 02 7063 9876  
bti.italia@bti-implant.it

#### **USA**

1730 Walton Road  
Suite 110  
Blue Bell. PA 19422-1802 · USA  
Tel: (1) 215 646 4067  
Fax: (1) 215 646 4066  
info@bti-implant.us

#### **MEXICO**

Ejército Nacional Mexicano 351, 3A  
Col. Granada Delegación Miguel Hidalgo  
Messico DF · CP 11520 · Mexico  
Tel: (52) 55 52502964  
Fax: (52) 55 55319327  
bti.mexico@bti-implant.com

[www.bti-biotechnologyinstitute.fr](http://www.bti-biotechnologyinstitute.fr)

REMARQUE : Veuillez consulter la disponibilité du produit sur les différents marchés auprès de chaque distributeur.



### **BTI APPLI**

NOUVEAUTÉS DES PRODUITS

Version iPhone / smartphone

Version iPad / Tablettes (**contenus exclusivement réservés à la clientèle**)