


SQUARE PILASTRO ESTETICO



bti.[®]

Human
Technology

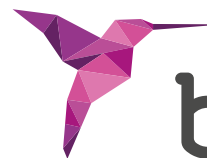

PILASTRI ESTETICI SQUARE



ECCELLENTE ESTETICA E GRANDE VERSATILITÀ

Nuova gamma di pilastri estetici Square per protesi diretta sull'impianto, che presentano un Profilo BIO per la conservazione a lungo termine della mucosa gengivale.



Grazie alla grande versatilità, si possono utilizzare con o senza guaina calcinabile, sia per la preparazione di protesi convenzionali sia per sistemi CAD/CAM.

CONSENTE L'UTILIZZO DI QUALSIASI TECNICA DI LABORATORIO

GUAINE CALCINABILI

- Realizzati in Ertacetal.
- Per processi convenzionali di laboratorio: iniezione di ceramica e colatura.
- Per piattaforma universal ⁽¹⁾, larga ⁽²⁾ e stretta ⁽³⁾.



MATERIALE

Realizzato in Titanio® con trattamento superficiale Ti Golden

DESIGN ANTIROTAZIONE

Disegno antirotazionale Square per facilitare il lavoro protesico in CAD/ CAM.

DUE VERSIONI



PROFILO BIO

Profilo protesico BIO per il mantenimento della vascolarizzazione della mucosa gengivale e per ridurre al minimo il rischio di recessione in caso di biotipi sottili.

(1) NON ROTANTE:

Per protesi unitaria (avvitata e cementata) e multipla cementata.

(2) ROTANTE:

Per protesi multipla avvitata.

ALTEZZE

I pilastri Square sono disponibili in varie altezze gengivali:

INTERNA: 0, 1, 2, 3 mm.

ESTERNA: 0, 1, e 2 mm.

PIATTAFORME


ESTERNA® Tiny®, universal e larga

INTERNA® 3.0, estretta, universal e larga

CONNESSIONI

INTERNA® 

ESTERNA® 

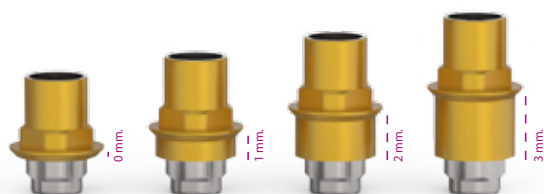

MODALITÀ DI UTILIZZO

SENZA GUAINA CALCINABILE

Per protesi disegnata in CAD/CAM. si usano come basi meccanizzate, sopra le quali si possono modellare corone in Zr, e-max, Ti, Cr-Co e resina.



CON GUAINA CALCINABILE

Per l'elaborazione di protesi convenzionali avvitate ⁽¹⁾ e cementate ⁽²⁾ (elaborazione del supporto perno).

(1)




(2)



VANTAGGI COMPETITIVI

1. PROTESI UNITARIA E MULTIPLA DIRETTA SULL'IMPIANTO: AVVITATA O CEMENTATA
2. CARICO IMMEDIATO SU IMPIANTI UNITARI IN ZONA ESTETICA.

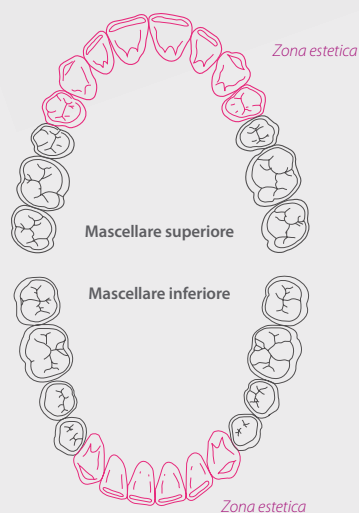

PROFILO DI EMERGENZA BIO: LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE DELLA MUCOSA GENGIVALE

- Consente di elaborare un **profilo di emergenza BIO** adeguato alle necessità di ogni paziente
- **Semplifica l'elaborazione** dei supporti in termini di tempo ed esperienza
- **Sigillatura ermetica** impianto-protesi
- **Grazie alla versatilità delle altezze** è possibile scegliere il perno in funzione del biotipo gengivale.



bti®

Biotechnology
Institute
Human Technology



BTI Comercial

San Antonio, 15 - 5º
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava) · SPAIN
Tel: +34 945 140 024
Fax: +34 945 135 203
pedidos@bticomercial.com

B.T.I.

Biotechnology Institute S.L.
Parque Tecnológico de Álava
Leonardo da Vinci, 14
01510 Miñano (Álava) SPAIN
bti.implantes@bti-implant.es

Subsidiaries

FRANCE

6 Avenue Neil Armstrong
Immeuble Le Lindbergh
33692 Merignac CEDEX · France
Tel: (33) 556 18 11 18
info@bti-implant.fr

GERMANIA

Mannheimer Str. 17
75179 Pforzheim · Deutschland
Tel. +49 (0) 7231 428060
Fax +49 (0) 7231 4280615
info@bti-implant.de

ITALIA

Via Conservatorio 22
20122 Milano · Italia
Tel: (39) 02 7060 5067
Fax: (39) 02 7063 9876
bti.italia@bti-implant.it

MEXICO

Ejercito Nacional Mexicano 351, 3A
Col. Granada Delegación Miguel Hidalgo
Messico DF · CP 11520 · Messico
Tel: (52) 55 52502964
Fax: (52) 55 55319327
bti.mexico@bti-implant.com

PORTOGALLO

Praça Mouzinho de Albuquerque, 113, 5º
4100-359 Porto · Portogallo
Tel: (351) 22 120 1373
Fax: (351) 22 120 1311
bti.portugal@bticomercial.com

UK

870 The Crescent
Colchester Business Park · Colchester
Essex CO49YQ · Regno Unito
Tel: (44) 01206580160
Fax: (44) 01206580161
info@bti-implant.co.uk

USA

1730 Walton Road
Suite 110
Blue Bell, PA 19422-1802 · USA
Tel: (1) 215 646 4067
Fax: (1) 215 646 4066
info@bti-implant.us

www.bti-biotechnologyinstitute.it

NOTA: Si prega di verificare la disponibilità del prodotto sui vari mercati con il proprio distributore di riferimento.



BTI APP

NUOVI PRODOTTI

Versione per iPhone / smartphone
Versione per iPad / Tablets (**Aera Cliente**)