


SQUARE PILAR ESTÉTICO



bti.[®]

Human
Technology

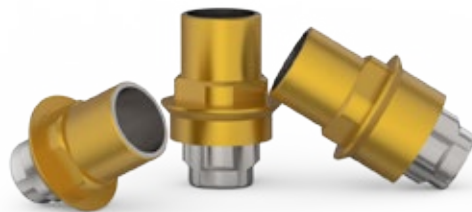

PILAR ESTÉTICO SQUARE



EXCELENTE ESTÉTICA E GRANDE VERSATILIDADE

Nova linha de pilares Square para prótese direta ao implante, que apresentam um Perfil BIO para a manutenção a longo prazo da mucosa gengival.



De grande versatilidade, podem ser utilizados com ou sem camisa calcinável, tanto para a elaboração de próteses convencionais como para sistemas de CAD/CAM.

PERMITE UTILIZAR QUALQUER TÉCNICA DE LABORATÓRIO

CAMISAS CALCINÁVEIS

- Fabricados em Ertacetal.
- Para processos convencionais de laboratório: injeção de cerâmica e colagem.
- Para plataformas universal ⁽¹⁾, larga ⁽²⁾ e estreita ⁽³⁾.




MATERIAL

Fabricado em Titânio (Ti) com tratamento superficial Ti Golden.

DESIGN ANTI-ROTACIONAL

Desenho antirrotacional Square para facilitar o trabalho protésico em CAD/CAM.

DUAS VERSÕES

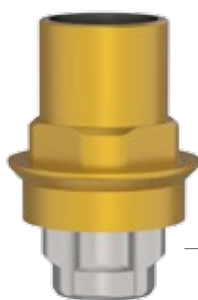

PERFIL BIO

Perfil protético BIO para a manutenção da vascularização da mucosa gengival e minimizar riscos de recessão em casos de biotipos gengivais finos.

(1) NÃO-ROTATÓRIO:

Para prótese unitária (aparafusada e cimentada) e múltipla cimentada.

(2) ROTATÓRIO:

Para prótese múltipla aparafusada.

ALTURAS

Os pilares Square estão disponíveis em várias alturas gengivais:

INTERNA: 0, 1, 2, 3 e 4 mm.

EXTERNA: 0, 2, 3 e 4 mm.

PLATAFORMAS

Preparado para todas as plataformas da BTI:


· EXTERNA® Tiny®, universal e larga

· INTERNA® 3.0, estreita, universal e larga

CONEXÕES

INTERNA® 

EXTERNA® 

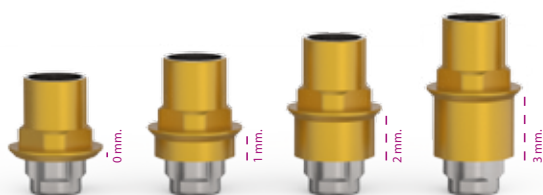

MODO DE UTILIZAÇÃO

SEM CAMISA CALCINÁVEL

Para prótese desenhada em CAD/CAM. Usa-se os postes como bases mecanizadas em Ti para prótese cimentada sobre as quais se pode modelar os casquilhos de Zr, e-max, Ti, Cr-Co e resina.



COM CAMISA CALCINÁVEL

Para elaboração de próteses convencionais aparafusadas ⁽¹⁾ e cimentadas ⁽²⁾ (elaboração do poste pilar).

(1)




(2)



VANTAGENS COMPETITIVAS

1. PRÓTESE UNITÁRIA E MÚLTIPLA DIRETA PARA IMPLANTE: APARAFUSADA OU CIMENTADA
2. CARGA IMEDIATA EM UNITÁRIOS ZONA ESTÉTICA.

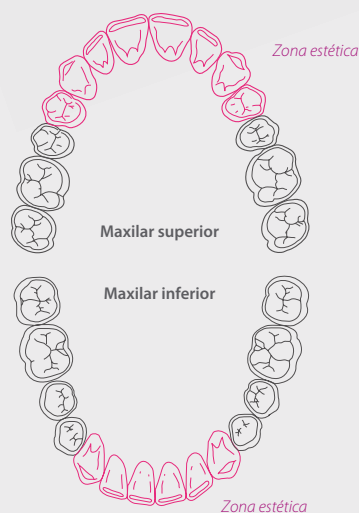

PERFIL DE EMERGÊNCIA BIO: A MANUTENÇÃO A LONGO PRAZO DA MUCOSA GENGIVAL

- Permite elaborar um **perfil de emergência BIO** adequado às necessidades de cada paciente.
- **Simplifica a elaboração** de postes a nível de tempo e experiência.
- **Selagem hermética** implante-prótese.
- **A versatilidade de alturas** permite escolher o pilar em função do biotipo gengival.



bti®

Biotechnology
Institute
Human Technology



BTI Comercial

San Antonio, 15 · 5º
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava) · SPAIN
Tel: +34 945 140 024
Fax: +34 945 135 203
pedidos@bticomercial.com

B.T.I.

Biotechnology Institute S.L.
Parque Tecnológico de Álava
Leonardo da Vinci, 14
01510 Miñano (Álava) SPAIN
bti.implantes@bti-implant.es

Filiais

GERMANY

Mannheimer Str. 17
75179 Pforzheim · Germany
Tel. +49 (0) 7231 428060
Fax +49 (0) 7231 4280615
info@bti-implant.de

PORTUGAL

Praça Mouzinho de Albuquerque, 113, 5º
4100-359 Porto · Portugal
Tel: (351) 22 120 1373
Fax: (351) 22 120 1311
bti.portugal@bticomercial.com

FRANCE

6 Avenue Neil Armstrong
Immeuble Le Lindbergh
33692 Merignac CEDEX · France
Tel: (33) 556 18 11 18
info@bti-implant.fr

UK

870 The Crescent
Colchester Business Park · Colchester
Essex CO49YQ · UK
Tel: (44) 01206580160
Fax: (44) 01206580161
info@bti-implant.co.uk

ITALY

Via Conservatorio 22
20122 Milano · Italy
Tel: (39) 02 7060 5067
Fax: (39) 02 7063 9876
bti.italia@bti-implant.it

USA

1730 Walton Road
Suite 110
Blue Bell, PA 19422-1802 · USA
Tel: (1) 215 646 4067
Fax: (1) 215 646 4066
info@bti-implant.us

MEXICO

Ejercito Nacional Mexicano 351, 3A
Col. Granada Delegación Miguel Hidalgo
Messico DF · CP 11520 · Mexico
Tel: (52) 55 52502964
Fax: (52) 55 55319327
bti.mexico@bti-implant.com

www.bti-biotechnologyinstitute.pt

NOTA: consulte disponibilidade do produto nos diferentes mercados com o seu distribuidor



BTI APP
NOVOS PRODUTOS

iPhone / smartphone versão
iPad / Tablets versão (**Área Cliente**)