

KEXIM

KIT DE EXTRACCIÓN DE IMPLANTES



LA SOLUCIÓN PARA EL RETRATAMIENTO IMPLANTOLÓGICO

Bien sea por causas biológicas o por causas mecánicas, **las extracciones de implantes son un reto para los profesionales de la implantología**, especialmente cuando quieren conservar al máximo el lecho óseo implantario para poder realizar inserciones inmediatas.

KEXIM te permite una extracción atraumática de los implantes en un menor tiempo y una mayor predictibilidad.

SISTEMA ATRAUMÁTICO

El uso del KEXIM preserva al máximo el volumen óseo alveolar en las explantaciones ⁽²⁾.

La mínima invasividad del lecho permite, en muchas ocasiones, insertar implantes inmediatos post explantación, reduciendo tiempos de espera y costes de segundas cirugías para el paciente.

Estudios de grandes muestras arrojan **tasas de éxito de 98,4% en explantaciones realizadas con KEXIM⁽¹⁾**.



⁽¹⁾ Anitua E, Fernandez-de-Retana S, Alkhraisat MH. Performance of the counter-torque technique in the explantation of nonmobile dental implants. *Int J Implant Dent.* 2020 Jan 9;6(1):1. doi: 10.1186/s40729-019-0197-z.

⁽²⁾ Anitua E, Orive G. A new approach for atraumatic implant explantation and immediate implant installation. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol.* 2012 Mar;113(3):e19-25. doi: 10.1016/j.tripleo.2011.06.035.

kim

COMPONENTES DEL KIT



LLAVE DE CONTRA-TORQUE

Permite romper con facilidad la unión entre el hueso y el implante hasta un límite de 200 Ncm.



EXTRACTORES MONOUSO

Extractores de diferentes anchuras y longitudes que permiten su adaptación a los distintos implantes del mercado.



FRESAS

Fresa para preparar el fondo de la conexión facilitando, en algunos casos, la sujeción en la zona más robusta.



MDPT1

Mango para transportar el extractor.

EXTENSORES

Juego de extensores de llave de contratorque.




¿Y SI LA EXPLANTACIÓN REQUIERE MÁS DE 200 Ncm?

El trefinado de sólo 3-5 mm. reduce el par máximo a menos de la mitad, para romper la conexión implante-hueso asegurando el éxito de la explantación.

FRESAS TREFINAS

Fresas que permiten cortes ultrafinos, reduciendo el trauma al hueso circundante. Varios diámetros según anchura de los implantes

No se incluyen en el Kit

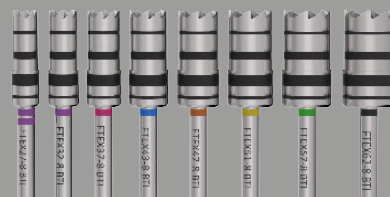



BTI Comercial

San Antonio, 15 · 5º
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava) · SPAIN
Tel: +34 945 140 024
Fax: +34 945 135 203
pedidos@bticomercial.com

B.T.I.

Biotechnology Institute S.L.

Parque Tecnológico de Álava
Leonardo da Vinci ,14
01510 Miñano (Álava) SPAIN
bti.implantes@bti-implant.es

Filiales

ALEMANIA

Tel. +49 7231 428060
Fax +49 7231 4280615
info@bti-implant.de

PORTUGAL

Tel: (351) 22 120 1373
Fax: (351) 22 120 1311
bti.portugal@bticomercial.com

FRANCIA

Tel: (33) 556 18 11 18
info@bti-implant.fr

UK

Tlf: +44 02039 661873
customerservice@bti-implant.co.uk

ITALIA

Tel.: +39 0270605067
info@bti-implant.it

USA

Cell: 610 209 6040
Office: 866 646 4067
info@bti-implant.us

MEXICO

Tel: (52) 55 52502964
Fax: (52) 55 55319327
bti.mexico@bti-implant.com

www.bti-biotechnologyinstitute.com

NOTA: Consulte disponibilidad del producto en los diferentes mercados con su distribuidor.



BTI APP

NOVEDADES DE PRODUCTO

Versión iPhone / smartphone

Versión iPad / Tablets (**contenidos exclusivos para clientes**)